





非界面活性型スルホベタイン(NDSB)

タンパク質の取り扱いに適合

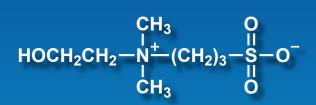

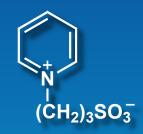

 $(CH_2)_3SO_3^-$

NDSB 211 1g 6,900円 / 5g 27,000円

NDSB 201 5g 4,300円/25g 14,600円 **NDSB 256-4T** 1g 10,800円

NDSBは分子内にカチオンとアニオンを持つ両親媒性の低分子 化合物です。一般的な界面活性剤とは異なる性質を示します。

- 疎水性部位が小さいためミセルを形成しない
- タンパク質と穏やかに結合を形成して可溶化
- 熱や酸による変性からのタンパク質の保護
- タンパク質の凝集防止
- タンパク質のリフォールディング促進
- 膜タンパク質の抽出促進

利用例

L. Vuillard, T. Rabilloud, R. Leberman, C. Berthet-Colominas, S. Cusack, FEBS Lett. 1994, 353, 294.

L. Vuillard, C. Braun-Breton, T. Rabilloud, Biochem. J. 1995, 305, 337.

M. E. Goldberg, N. Expert-Bezancon, L. Vuillard, T. Rabilloud, Fold. Design 1996, 1, 21.

L. Vuillard, T. Rabilloud, M. E. Goldberg, Eur. J. Biochem. 1998, 256, 128.

N. Expert-Bezançon, T. Rabilloud, L. Vuillard, M. E. Goldberg, Biophys. Chem. 2002, 100, 469.

S. D'Amico, G. Feller, Anal. Biochem. 2009, 385, 389.

M. Hagihara, A. Takei, T. Ishii, F. Hayashi, K. Kubota, K. Wakamatsu, N. Nameki, FEBS Open Bio 2012, 2, 20.

上記以外の界面活性剤についても取り揃えています。各製品の詳細はTCI のウェブサイトで ▶▶▶ TCI 界面活性剤





東京仁成工業株式会社

試薬製品について

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階 ■本社営業部 Tel: 03-3668-0489 Fax: 03-3668-0520 E-mail: Sales-JP@TCIchemicals.com

■大阪営業部 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-21 第2中井ビル1階 Tel: 06-6228-1155 Fax: 06-6228-1158 E-mail: osaka-s@TCIchemicals.com

スケールアップ、受託サービス(合成・開発・製造)について

□化成品営業部

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階 Tel: 03-5651-5171 Fax: 03-5640-8021 E-mail: finechemicals@TCIchemicals.com

弊社製品取扱店

本誌掲載の化学品は試験・研究用にのみ使用するものです。化学知識のある専門家以外 の方のご使用はお避けください。品目や製品情報等、掲載内容の変更を予告なく行う場合 があります。内容の一部または全部の無断転載・複製はご遠慮ください。